



EYE DROP GUIDE

Holds the eye open and directs the drops, allowing for accurate eyedrop installation! Clips into place over most eye drop bottles and positions the bottle at the correct angle over the eye.

Français au verso

www.parsonsadl.com

16M002A




0 65292 27002 9

Parsons ADL Inc.

Tottenham, ON Canada L0G 1W0

Special cup prevents blinking by keeping the lower eyelid open. Unique pinhole directs eyesight upward and away from the descending drops.

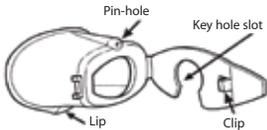

INSTRUCTIONS:



1. Open Autodrop®. Loosen cap from bottle but do not remove completely.
2. Place the keyhole slot around the base of the bottle neck. Remove cap.
3. Close the Autodrop®. Do not force the bottle nose into Autodrop®, it should close easily.
4. Hold down lower eyelid. Place Autodrop® over the eye with the lip of the Autodrop® against the cheek.
5. Tilt head backwards, look through pin-hole towards the light.
6. Squeeze bottle gently to allow prescribed drops to fall

into the eye.

7. Open Autodrop® and replace top on eye drop bottle.

8. To clean Autodrop® remove eye drop bottle and wash Autodrop® in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.

The manufacturer recommends that Autodrop® is used for the whole course of treatment for an eye disorder. When an eye drop bottle is discarded remove Autodrop® and clean thoroughly before fitting to the new bottle. Autodrop® may be used on more than one type of eye drop at the same time but if you suffer from more than one eye complaint we recommend that you use a separate Autodrop® for each type of eye drop.

For clinics and hospitals: Autodrop® may be autoclaved on a low pressure cycle for 30 minutes. Release clip to allow moisture to evaporate. Autodrop® can also be cleaned in sterilizing fluid. Rinse and dry thoroughly.

PC-022



Guide pour gouttes aux yeux

Ce guide garde l'œil ouvert afin d'assurer la distribution précise des gouttes. S'adapte à la plupart des bouteilles en plaçant la bouteille à l'angle nécessaire au-dessus de l'œil.

www.parsonsadl.com

16M002A




0 65292 27002 9

Parsons ADL Inc.

Tottenham, ON Canada L0G 1W0

La forme unique du guide empêche le clignement des yeux en gardant la paupière inférieure en place. En regardant par le petit trou, votre vue est détournée de la coulée des gouttes.

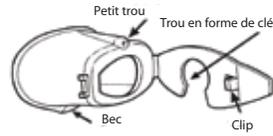

INSTRUCTIONS :



1. Ouvrir la languette du guide. Desserrer le capuchon de la bouteille de gouttes, mais ne pas l'enlever complètement.
2. Positionner le trou en forme de clé de la languette autour du col de la bouteille. Enlever le capuchon.
3. Fermer le guide. Ne pas forcer le bout de la bouteille dans le guide, il devrait fermer facilement.
4. Retenir la paupière inférieure en place. Positionner le guide sur l'œil avec le bec du guide contre la joue.
5. Pencher la tête vers l'arrière et regarder par le petit trou situé

vers le haut du guide. 6. Presser légèrement la bouteille afin de laisser tomber le nombre désiré de gouttes dans l'œil.

7. Ouvrir le guide et remplacer le capuchon sur la bouteille. 8. Pour nettoyer le guide — enlever la bouteille de gouttes et laver le guide dans l'eau tiède savonneuse. Rincer et bien sécher.

Le fabricant recommande que le guide soit utilisé pour le traitement au complet des troubles de la vue. Quand une bouteille de gouttes est vide, enlevez-la du guide et bien nettoyer le guide avant d'installer une nouvelle bouteille. Le guide peut être utilisé avec plus d'une sorte de gouttes en même temps, mais si vous souffrez de plus d'un trouble de vue nous recommandons l'utilisation d'un guide pour chaque sorte de gouttes aux yeux. Pour les dispensaires et les hôpitaux : Le guide peut être stérilisé à l'autoclave à basse pression pour 30 minutes. Ouvrir la languette pour laisser l'humidité évaporer. Le guide peut également être nettoyé dans un agent de stérilisation. Rincer et bien sécher.

PC-022