


Clear Transparent WHEELCHAIR TRAY

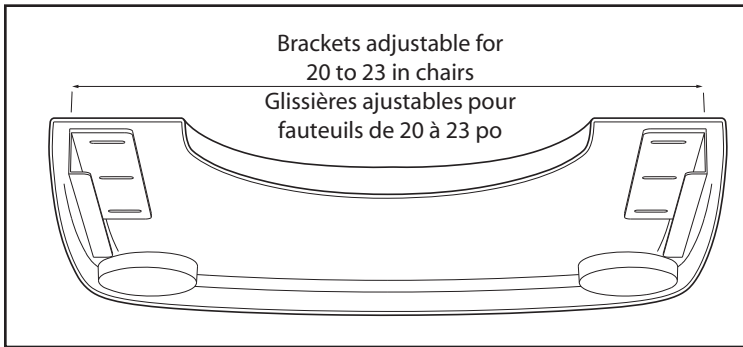

TRAY SIZE: 24 x 21 in (61 x 53 cm)

Dimensions de la tablette : 24 x 21 po (61 x 53 cm)

WARNING - AVERTISSEMENT

Note: Check all parts for shipping damages before using. In case of damage, do NOT use this tray. Contact the Dealer for further instructions.

Nota : Veuillez vérifier qu'aucune pièce n'a été endommagée lors du transport. En cas de dommage, ne PAS utiliser la tablette et contacter votre distributeur pour plus d'information.

This molded transparent tray with BLIND FASTENING SYSTEM has all smooth edges so there is no place for dirt or germs to collect. Easy to wipe clean. Rounded corners and edges protect tender skin. There are two recessed wells at the front corners for drinking cups, etc. The tray is raised slightly around the torso cutout to help reduce minor spills from reaching the user's lap. The transparent material makes it easy for the person to see the front corners of the chair through the tray while the chair is in motion. A great safety feature. Lightweight and strong.

INSTRUCTIONS: The tray mounts firmly to the wheelchair by sliding onto the armrests, using our adjustable slide on bracket system. This tray will mount on flat, padded or tubular armrests.

For proper fit: Adjust brackets so that the inside edge of the brackets matches the outside to outside arm width of the wheelchair that the tray is to be placed on.

CARE: This clear tray is composed of an extremely durable PETG plastic resin that allows surface scratches to be removed with a heat gun or hair dryer. To clean, wipe with a damp cloth. You may use detergent soap or anti-bacterial disinfectants.

Tablette transparente pour fauteuil roulant

Cette tablette moulée transparente, légère et robuste, avec un SYSTÈME DE FIXATION MASQUÉE, est munie de bordures lisses pour ne pas laisser de place à la saleté ou les germes de s'y ramasser et pour le rendre plus facile à nettoyer. Le contour arrondi de la tablette protège la peau tendre. Deux puits encastrés vers l'avant de la tablette peuvent tenir votre gobelet, etc. La tablette est légèrement surélevée autour de la découpe du torse pour aider à réduire les déversements mineurs qui pourraient se retrouver sur les genoux de l'utilisateur. La transparence de la tablette permet à l'utilisateur de voir le devant de la chaise à travers la tablette lorsque le fauteuil bouge, ce qui est un avantage pour la sécurité.

INSTRUCTIONS: La tablette s'installe fermement sur le fauteuil roulant en le glissant sur les accoudoirs grâce à notre système de glissières ajustables. Cette tablette peut être installée sur des accoudoirs plats, rembourrés ou tubulaires. **Pour un ajustement juste :** Ajuster les glissières de telle sorte que la distance intérieure de celles-ci correspond à la distance extérieure des accoudoirs du fauteuil roulant.

ENTRETIEN: Cette tablette transparente est composée d'une résine de plastique PETG extrêmement durable qui permet d'enlever les rayures sur la surface avec un séchoir à air chaud. Pour nettoyer, essuyer avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser un savon détergent ou un désinfectant antibactérien.

PI-118

